




LALOOP 2F



www.2fsurgical.com



Lasso Monopolaire 5 mm

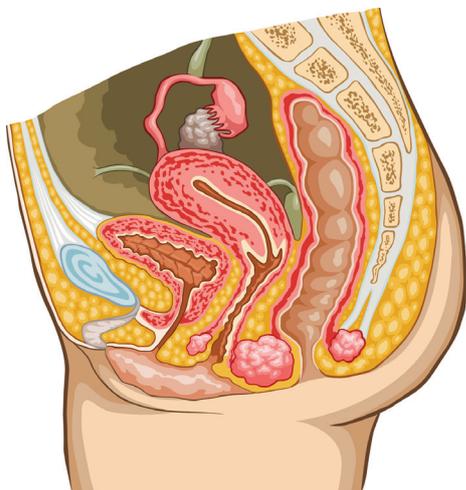

Indications

- ▶ Hystérectomie supra cervicale laparoscopique, Myomectomie.

Avantages

- ▶ Coupe et coagulation en un seul geste,
- ▶ Coupe précise et sécurisée,
- ▶ Taille unique adaptée à tous les diamètres d'utérus,
- ▶ Réduction de la durée opératoire.

Référence

04-00753

Désignation

LAPLOOP 2F

Conditionnement

Boite de 5 dispositifs

TENSION : 1000 Vp
MODE : MONOPOLAIRE
CYCLE D'UTILISATION : Cycles de 30 s (éviter le mode continu)

Réglage selon type de générateur :

Marque

Mode

Puissance

STORZ AUTOCON II 400

TOP CUT 160

120 - 160 W

ERBE

TOP CUT 160

120 - 160 W

BOWA ARC 400

METRALOPP

650 Vp

KLS MARIN MAXIMUM

SOFT CUT

160 W

www.2fsurgical.com

Commercialisé par