



Chirurgie de l'incontinence urinaire d'effort



Le Grand Bosquet B - Chemin de Font Sereine - 13420 GEMENOS
Tél.: +33(4)42829554 - Fax: +33(4)96181347 - mail: contact@2fsurgical.com

Swift Sling® Bandelette sous-urétrale

	DS 500001	SWIFT SLING 500 EJB Polypropylène LW 400 x 10 mm
	DS 500031	SWIFT SLING 500 EJB Polypropylène LW + Instrumentation TOT In Out / Out -In + guide U.U
	DS 500091	SWIFT SLING 500 EJB Polypropylène LW + Instrumentation TVT U.U
	952300	UG3 Aiguilles réutilisables hélicoïdales Dte et Ghe TOT In Out / Out -In + guide
	952900	UG1 Aiguille réutilisable Type TVT
	952600	UG1 P Aiguille réutilisable TOT Out / In



La prothèse SWIFT SLING® est une bandelette sous urétrale de faible élasticité, constituée d'une structure textile en polypropylène monofilament (PP), qui permet la correction sélective de l'appui sous-urétrale lorsqu'une Incontinence Urinaire d'Effort (IUE) doit être traitée.

La bandelette possède des bords atraumatiques dentelés assurant un excellent ancrage primaire. La bandelette est destinée à être placée symétriquement sous l'urètre, avec un axe de passage transobturateur (TOT) ou sus pubien (TVT) selon l'indication retenue par le praticien.

L'implantation de la SWIFT SLING® est aisée et nécessite une technique chirurgicale simplifiée (technique TVT ou TOT). La mise en place de cette prothèse en polypropylène monofilament répond au standard chirurgical validé pour le traitement chirurgical de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme.



Chirurgie du prolapsus par voie coelioscopique

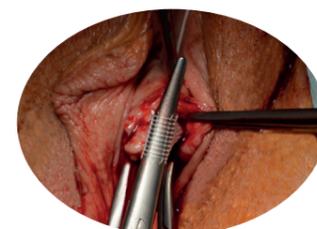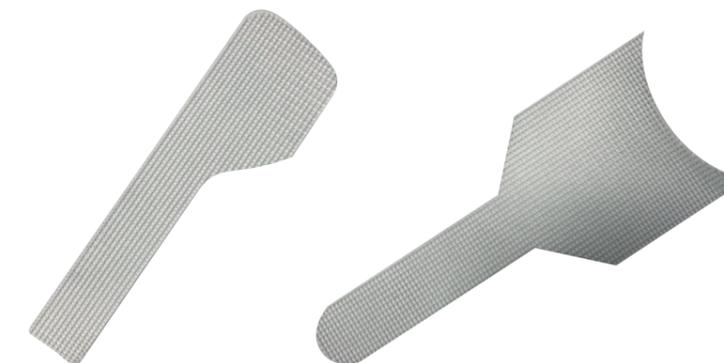


Prothèse S-Swift®
Implants pour promontofixation

CE Gamme Swift 2f Surgical
1639 fabriquée en France par Microval

Gamme S-Swift®

 80/25 190 mm +40/25 190 mm	DS 414001	S-SWIFT Standard 80/25 et 40/25 polypropylène LW Lg 19cm
 80/25 240 mm +40/25 240 mm	DS 414002	S-SWIFT Plus 80/25 et 40/25 polypropylène LW Lg 24cm
 70/25 173 mm +47/25 160 mm	DS 414011	S-SWIFT AS 70/25 Lg 17,3cm et 47/25 Lg 16cm polypropylène LW
 70/40/25 200 mm	DS 414012	S-SWIFT AS 70/40/25 polypropylène LW Lg 20cm
 80/25 190 mm +40/25 190 mm	DS 416001	S-SWIFT Standard 80/25 et 40/25 polyester Lg 19cm
 80/25 240 mm +40/25 240 mm	DS 416002	S-SWIFT Plus 80/25 et 40/25 polyester Lg 24cm
 70/25 173 mm +47/25 160 mm	DS 416011	S-SWIFT AS 70/25 Lg 17,3cm et 47/25 Lg 16cm polyester
 40/25 et 60/25 par 180mm	DS 416025	S-SWIFT EM 60/25 40/25. Polyester Lg 18 cm
	Custom Pack	Vos implants sur mesure. Information auprès de nos commerciaux

2F Surgical a développé en collaboration avec des experts une gamme d'implants adaptés à la promontofixation répondant aux critères réglementaires et cliniques en vigueur.

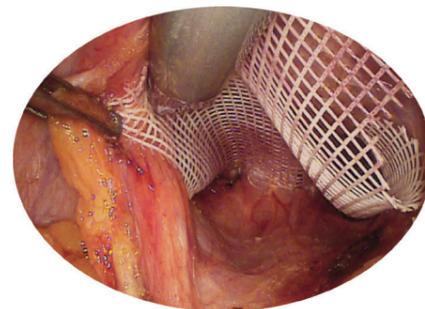

CE Gamme Swift 2f Surgical
1639 fabriquée en France par Microval

2 matériaux :

- **Polypropylène léger** spécialement tricoté pour la chirurgie du prolapsus dans une trame minimisant l'étirement et de ce fait la rétractation prothétique.
- **Polyester** (PET) matériau de faible rétraction qui donne souplesse et mémoire de forme à la prothèse.

Caractéristiques :

- **Prothèse antérieure**
Marquage encre biocompatible facilitant le repérage lors de la fixation au promontoire, Forme de raquette dans le but de prévenir la récurrence latérale.

• Prothèse postérieure

Large et recoupable visant à minimiser les dyschésies.

2 longueurs :

- **S SWIFT STANDARD** : 19 cm
- **S SWIFT PLUS** : 24 cm

2 dispositifs d'agrafage

Spire'it®



Agrafes en alliage à mémoire de forme pour la fixation des prothèses antérieures et postérieures dans la promontofixation par voie coelioscopique.

Dispositif Français, Spire 'It est fabriqué à base d'un fil de Nitinol.

En pénétrant dans les tissus le fil prend la forme d'un ressort de deux spires d'environ 4mm de diamètre.

Sans pénétrer en profondeur sa forme permet d'assurer une excellente fixation des implants.

Profound®

Dispositif stérile à usage unique 5 mm délivrant une agrafe titane hélicoïdale pour la fixation des treillis prothétiques.



Agrafe hélicoïdale titane

Référence	Désignation	Conditionnement
943300	Applicateur 30 cm avec 10 sutures	1 par boîte
943302	Applicateur 30 cm avec 20 sutures	1 par boîte
MFD15N	Profound Titanium 15 unités	1 par boîte
MFD30N	Profound Titanium 30 unités	1 par boîte