

MORCELLATEUR UTERIN ET SAC





M (R SAFE TM

Morcellation puissante et sécurisée

Aujourd'hui, les avantages de la cœlioscopie ne sont plus à démontrer pour une hystérectomie subtotale ou une myomectomie (réduction des douleurs post opératoires, réduction de la durée d'hospitalisation, etc.). Les recommandations actuelles préconisent que la morcellation de la masse tissulaire opérée soit effectuée à l'intérieur d'un sac d'isolement.

Le morcellateur Versator[®] est un dispositif vous offrant la possibilité de morceller en utilisant une pièce à main - légère et puissante, à usage unique - tout en ayant la possibilité de réutiliser le rotor jusqu'à 10 fois.

Le sac de morcellation MorSafeTM a été conçu afin de rendre plus sécurisée la morcellation utérine. L'utilisation du sac MorSafe empêche la dissémination du tissu morcelé dans la cavité péritonéale.

Le morcellateur Versator, combiné au sac de morcellation MorSafe, offre aux patientes un soin répondant aux derniers et meilleurs standards.

Le chirurgien peut ainsi morceller de grosses masses tissulaires avec efficacité, rapidité et en toute sécurité.






SAC DE MORCELLATION

Le sac MorSafeTM est un dispositif innovant à usage unique qui empêche la dissémination des tissus dans la cavité péritonéale, permettant ainsi une morcellation sûre.

Utilisé avec le Morcellateur de tissus Versator[®], le système contient et élimine la masse tissulaire bénigne morcelée.

Le sac possède des **caractéristiques uniques** assurant un déploiement rapide, l'insufflation, la morcellation ainsi qu'un retrait en toute étanchéité. Le sac MorSafeTM offre au chirurgien une **visibilité optimale** pendant la chirurgie grâce à ses deux orifices brevetés, comparé à une approche à un seul orifice. Conçu pour s'adapter et prendre la forme de l'abdomen, il est fabriqué dans un matériau ultra résistant à la déchirure. Il contient également un anneau spécial au niveau de l'ouverture pour permettre au chirurgien de contrôler le déploiement du sac et d'accéder facilement à l'intérieur du sac pendant la morcellation.

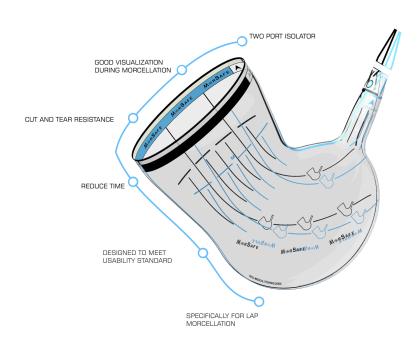



• PIECE à MAIN

Le système de morcellation Versator[®] se compose d'une pièce à main jetable avec un couteau de diamètre 15mm + un rotor réutilisable connecté à une unité centrale. Cette combinaison polyvalente offre des avantages de rentabilité et de performance.

La pièce à main se présente dans une plaquette thermoformée stérile avec ses accessoires tels qu'un obturateur en plastique expansible et deux tailles de réducteurs.

2 modes de coupe avec garde-corps rotatif :



Dual Cutting Modes

Rotatable Core Guard



Morcellation rapide, vitesse 250 à 2000 RPM
Poignée ergonomique
Valve d'étanchéité avec réducteur 5-10mm
Garde-corps rotatif
Introducteur







• UNITE CENTRALE VDU

> Principales caractéristiques


Le moteur à couple élevé et la lame tranchante permettent une coupe régulière même à travers les myomes calcifiés.

> Ergonomie Design

Prise en main ergonomique, l'activation de l'interface est intuitive et les pédales permettent de réduire la fatigue.

Utilisation simple

L'interface utilisateur est simple et facile. La connexion avec la pièce à main « Quick & One touch » aide l'utilisateur à maîtriser rapidement l'outil.

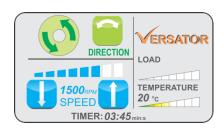

> Large gamme de vitesse

Huit niveaux de vitesse permettent à l'utilisateur de mieux contrôler la vitesse de morcellation et d'augmenter son efficacité.

> Produit de haute qualité

Utilisation de matériaux biocompatibles pour assurer une plus longue durée de vie et une meilleure fiabilité pendant des années.

> Rotor

La longueur du câble permet une maniabilité aisée. Il peut être restérilisé en autoclave et réutilisé jusqu'à 10 fois.







REFERENCE	DESIGNATION
VT-H15-1	Pièce à main morcellateur diam. 15 mm avec obturateur et embouts réducteurs diam. 5 mm et diam. 10 mm (stérile et à usage unique)
XG5M-5	Lot de 5 sacs de morcellation de taille moyenne : imprimé bleu et noir
XG5L-5	Lot de 5 sacs de morcellation de grande taille : imprimé bleu et noir
VR-R1	Câble de transmission : non stérile et utilisation limitée à 10 stérilisations
VRXG5M-1	Pièce à main morcellateur 15 mm avec obturateur et 2 embouts réducteurs (stérile et à usage unique) + Sac de taille moyenne imprimé noir et bleu
VRXG5L-1	Pièce à main morcellateur 15 mm avec obturateur et 2 embouts réducteurs (stérile et à usage unique) + Sac de grande taille imprimé noir et bleu

Dispositifs chirurgicaux certifiés, testés et évalués cliniquement.

CE 0120





Commercialisé par 2F Surgical Le Grand Bosquet, Bat B Chemin de Font Sereine 13240 GEMENOS

Tel: 04.42.82.95.54 - Mail: contact@2fsurgical.com