




## LUNAR U – Agrafeuse endoscopique motorisée

*LUNAR est une agrafeuse chirurgicale linéaire électrique à usage unique*

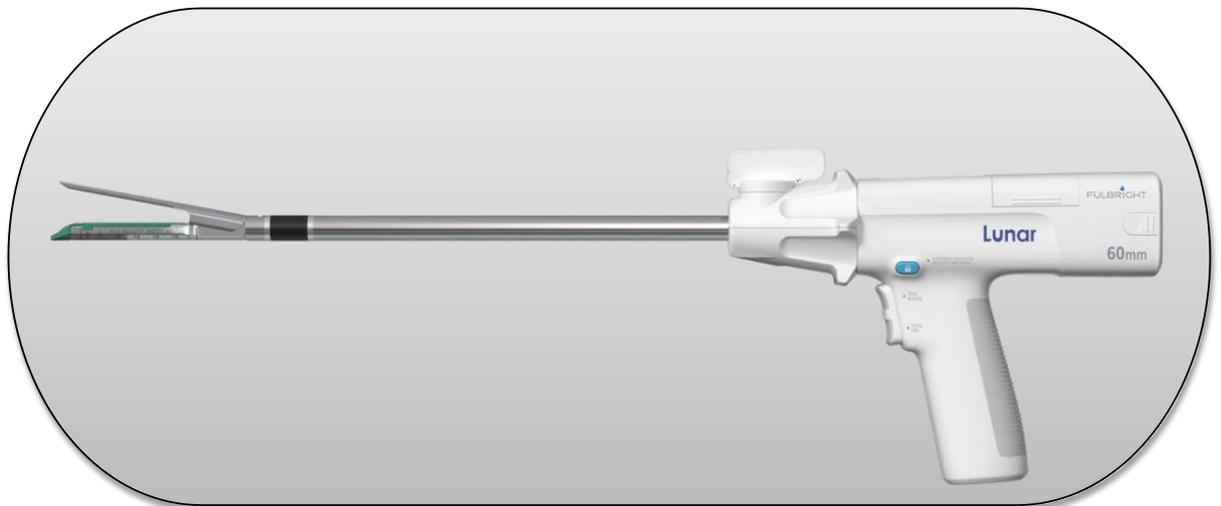

### FONCTIONNEMENT SÛR, FIABLE ET SÉCURISÉ

- La ligne d'agrafe dépasse la ligne de coupe de 3 mm pour assurer la sécurité de l'opération.
- Système de verrouillage de sécurité permettant de fixer la position souhaitée avant le lancement de la coupe et l'agrafage.
- Les 6 rangées d'agrafes sont placées en une seule application réduisant le risque d'hémorragie et le traumatisme tissulaire.

### CONTRÔLE ÉLECTRIQUE INTELLIGENT,

- Ecran Oled :
  - \* Pre-compression
  - \* Charge de la batterie
  - \* Position de la lame
  - \* Statut de la mâchoire
  - \* Indication d'erreur
  - \* Compteur de la suture
- Mâchoire manuelle Ouverture + retrait des lames (urgence)
- Articulation bidirectionnelle en continu



### LÉGÈRE ET FLEXIBLE, OPERATION À UNE SEULE MAIN

- Conception ergonomique de la poignée et du bouton pour une utilisation facile

# AGRAFEUSES



## 45mm

## 60mm

Ref	Longueur du Shaft (mm)	Nbr de tirs max	Pcs/Carton
FSAS45	280	15	3
FSAM45	340	15	3
FSAL45	440	15	3
FSAS60	280	15	3
FSAM60	340	15	3
FSAL60	440	15	3

\* Extracteur de recharges inclus dans l'emballage, l'embout courbé est optionnel



## BATTERIES

Ref	Voltage	Capacité
DMB	12V	1550mAh

# RECHARGES



## 45mm

## 60mm

Ref	Couleur	Rangs	Type de tissus	Hauteur d'agrafe ouverte (mm)	Hauteur d'agrafe fermée (mm)	Pcs/Carton
FMCC45	Gris	6	Mésentère	2.5	0.75	72
FMCW45	Blanc	6	Vasculaire	2.5	1.0	72
FMCB45	Bleu	6	Normal	3.5	1.5	72
FMCY45	Or	6	Normal/Epais	3.8	1.8	72
FMCG45	Vert	6	Epais	4.1	2.0	72
FMCX45	Noir	6	Très épais	4.4	2.3	72
FMCC60	Gris	6	Mésantère	2.5	0.75	72
FMCW60	Blanc	6	Vasculaire	2.5	1.0	72
FMCB60	Bleu	6	Normal	3.5	1.5	72
FMCY60	Or	6	Normal/Epais	3.8	1.8	72
FMCG60	Vert	6	Epais	4.1	2.0	72
FMCX60	Noir	6	Très épais	4.4	2.3	72

## **AVANTAGES**

- Une meilleure hémostase de la ligne d'agrafes
- Excellente ergonomie
- Fonctionnement et agrafe à une seule main
- Ce produit permet de couper 7-8 mousses pendant plus de 15 cycles
- Ecran Oled

Commercialisé par **2F Surgical**

Le Grand Bosquet

Bat B Chemin de Font Sereine

13240 GEMENOS

Tel : 04.42.82.95.54 - Mail : [contact@2fsurgical.com](mailto:contact@2fsurgical.com)

Fabriqué par **FENGH Medical Co., Ltd**

D3 n°6 Dongsheng West Road

Jiangyin National High Tech Zone,

Jiangsu China

Site Web : [www.fulbrightmed.com](http://www.fulbrightmed.com)



0197

